

# VAREKATALOG FOR RAMMEAVTALEPRODUKTER

Oslo og samhandlende kommuner  
Fra mars 2020



Delkontrakt 2: Personløftere og seil



# Ny rammeavtale for senger, madrasser, personløftere og tekniske hjelpemidler

Vi i Invacare AS er glade for å informere om fornyet kontrakt med Oslo kommune! Vi har fra mars 2020 inngått rammeavtaler med Oslo kommune og samarbeidende kommuner om levering av senger, madrasser, personløftere og tekniske hjelpemidler.

## Invacare har kontrakt på områdene:


- Delkontrakt 1:enger, madrasser og nattbord
- Delkontrakt 2: Personløfter og seil
- Delkontrakt 3: Forflytning og mobilitet

Vi har i denne katalogen samlet informasjon om **Delkontrakt 2 Personløftere og seil** hvor vi kombinerer velkjente konsepter med spennende nyheter. En helt nyutviklet aktivløfter **ISA XPlus** og en oppgradert passivløfter **Birdie Evo** med nye løsninger.

### ISA XPlus - Aktiv



### Birdie Evo - Passiv

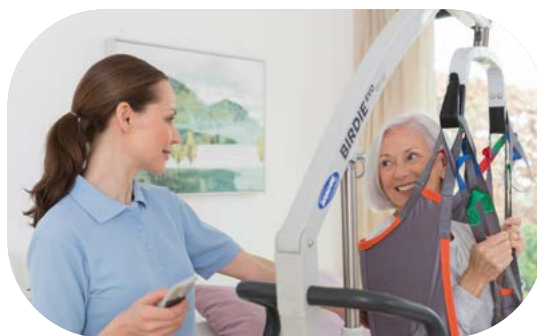

Katalogen presenterer vårt avtalesortiment og øvrig sortiment som er merket **stjerne\***. Delkontrakt 1 og Delkontrakt 3 har egne kataloger.

## Informasjon om avtalene

Alle leverandører er likestilte. Informasjon om avtalene finnes på kommunenes intranett eller på e-handelsplattformen valgt av de ulike kommunene.

- Alle bestillinger med en verdi under 75 000 kroner kan gjøres direkte til leverandør.
- For bestillinger over 75 000 kroner skal det iverksettes minikonkurranse.

## Dine kontaktpersoner i Invacare AS

|                                                  |                                               |                            |                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Aina Evensen</b><br><b>Teknisk Oslo</b>       | Oslo og Akershus                              | 976 09 418<br>22 57 95 00  | aevensen@invacare.com<br>teknisk@invacare.com   |
| <b>Tom Inge Paulsen</b><br><b>Teknisk Larvik</b> | Buskerud, Vestfold og Telemark<br>Ole Herland | 915 14 513<br>415 02 661   | tipaulse@invacare.com<br>teknisk@invacare.com   |
| <b>Kundeservice</b><br><b>Bestillinger</b>       | Rachida Laagar                                | 22 57 95 00<br>22 57 95 00 | norway@invacare.com<br>ordernorway@invacare.com |

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med et bredt utvalg av nye spennende produkter!  
Hilsen oss i Invacare AS

## Innholdsfortegnelse

### Delkontrakt 2: Personløftere og seil

|                                         |                                                          |               |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Mobil personløfter aktivt løft          | Invacare <b>ISA™ XPlus</b>                               | <b>Nyhet!</b> | <b>4</b>  |
| Mobil personløfter passivt løft og vekt | Invacare <b>Birdie®EVO Plus</b>                          | <b>Nyhet!</b> | <b>8</b>  |
| Takløfter og vekt                       | Invacare <b>Robin®</b> takløfter                         |               | <b>12</b> |
| Skinnesystem til takløfter              | Invacare <b>EC-Track™</b> skinnesystem                   |               | <b>16</b> |
| Seilprogram                             | Invacare <b>Seil</b> til takløfter og mobil personløfter |               | <b>18</b> |
|                                         | Invacare <b>Seil</b> til personløfter aktivt løft        |               | <b>18</b> |

# ISA™

## Invacare Stand Assist



Ny ergonomisk oppreisningsløfter  
fra Invacare



# Nyutviklet løfter fra Invacare

Invacare **Stand Assist (ISA)** er et nyutviklet produkt i Invacare sin nye løfteserie. Den er ideell til brukere som har behov for assistanse under en forflytning.

Under utviklingen har vi i Invacare hatt fokus på sikkerhet, komfort og en mer behagelig opplevelse for brukerne.

For omsorgspersoner er brukervennlighet et grunnleggende element, derfor har **ISA** lav vekt, og brukervennlig design. **ISA** kan enkelt demonteres uten verktøy og transporteres enkelt.




 NYHET

 SMARTE  
FUNKSJONER

## Lengde justerbar Løftebom

- **Løftebommen** kan enkelt lengde justeres for å tilpasse brukerens høyde for å sikre god ergonomi.

## Ergonomisk grep

- Det unike designet er tilpasset håndens naturlige form for et godt og sikkert grep.

## Leggstøtte

- Leggstøtten justeres enkelt med et grep i opp til seks forskjellige høyder samtidig som vinkelen på leggputen justerer seg automatisk til brukeren.

## Ergonomiske egenskaper


- **Fotplate:** tre forskjellige høyder tilgjengelig for individuell tilpasning til brukerens ergonomi
- **Kjørebøyle:** ergonomisk utformet og muligheter for mange grep slik at pleier enkelt kan håndtere løfteren.
- **Kroker til seil:** fleksible og sikre kroker for rask og sikker påføring av seil.
- **Leggbånd:** Tilgjengelig som tilbehør. Leggbåndet har god polstring, er vaskbart og enkel å montere.
- **Avrundede ben:** ISA har buede bein for bedre manøvrering rundt stoler og toaletter.



## Teknisk data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se [www.invacare.no](http://www.invacare.no).

|                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Løftekapasitet ▼                                                                  | Lengde ▼                                                                          | Bredde ▼                                                                          | Innvendig bredde ▼                                                                 | Innvendig bredde Åpen ▼                                                             | Sving Radius ▼                                                                      |
| ISA <sup>PLUS</sup>  | 180 kg                                                                            | 1220 mm                                                                           | 640 mm                                                                            | 480 mm                                                                             | 1020 mm                                                                             | 1400 mm                                                                             |
| ISA <sup>XPLUS</sup> | 200 kg                                                                            | 1280 mm                                                                           | 640 mm                                                                            | 480 mm                                                                             | 1020 mm                                                                             | 1430 mm                                                                             |
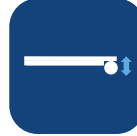
|                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Produkt vekt ▼                                                                    | Høyde med bom i lav/høy innstilling ▼                                             | Løfteområdet med kort og lang innstilling av løftebom ▼                           | Bakkeklinging ▼                                                                   | Høyde på ben ▼                                                                     | Løftehastighet ▼                                                                    | Antall løft per ladning ▼                                                           |
| ISA <sup>PLUS</sup>  | 49 kg                                                                             | 1650 / 1800 mm                                                                    | 505 / 675 mm                                                                      | 35 mm                                                                             | 115 mm                                                                             | 46 mm/s                                                                             | 82                                                                                  |
| ISA <sup>XPLUS</sup> | 52 kg                                                                             | 1650 / 1800 mm                                                                    | 505 / 675 mm                                                                      | 35 mm                                                                             | 115 mm                                                                             | 46 mm/s                                                                             | 82                                                                                  |



## Artikkelnummer ▼

Produkter merket med stjerne (\*) er øvrig sortiment.

| Artikkelnummer | Beskrivelse                       |
|----------------|-----------------------------------|
| 1656221        | Oppreisningsløfter ISA XPlus      |
| * 1656034      | Oppreisningsløfter ISA Plus       |
| 1484685        | Løfteseil ståløfter, lite         |
| 1484686        | Løfteseil ståløfter, medium       |
| 1484687        | Løfteseil ståløfter, stort        |
| 1484688        | Løfteseil ståløfter, ekstra stort |



▲ Fotplate

Høye brukere art nr: SP1650441  
Medium art nr: SP1650439  
Kort art nr: SP1650440



▲ Leggbånd

Art.nr: SP1656592

**Birdie<sup>®</sup>EVO**



**Mobil personløfter for passivt løft**

**NYHET**



### Slow'R®

- Integrert demping av bevegelsene i løftebøylen gir en bedre opplevelse for bruker



### SMARTLOCK®

- Hurtigkobling på løftebøylen for enkelt og trygt bytte av løftebøyer



### Hook Design

- Nytt design på løftebøylens kroker gjør det enkelt og trygt å henge på løfteseil

### NYE egenskaper



- Ergonomiske håndtak gjør manøvrering og håndtering enklere og mer ergonomisk



- Buede ben gjør det enklere å komme godt inn over stol ved forflytting



- Buet løftebom gir mer plass og bedre kontakt mellom bruker og pleier





## Forbedret design

### ◀ **Slow'R®** PATENTED **Reduserer bevegelsene**

En demper inne i bomen fanger bevegelsene og reduserer vugging av bruker. Det gir mer komfort for bruker og bedre kontroll under løftet hos pleier.



### ◀ **SMARTLOCK®** PATENTED **Enkel og sikker kobling ved bytte av løftebøyle**

Den nye mekanismen gjør det raskt, enkelt og sikkert å endre løftebøyle uten verktøy.




### ◀ **Nytt design på løftekroker**

Nye store ergonomisk kroker gjør det enkelt og sikkert å henge på løfteseil.

### ▼ **Enkel å håndtere, transportere og lagre**

**Birdie<sup>EVO</sup>** kan enkelt legges sammen uten bruk av verktøy. Den tar opp lite plass under transport og lagring.

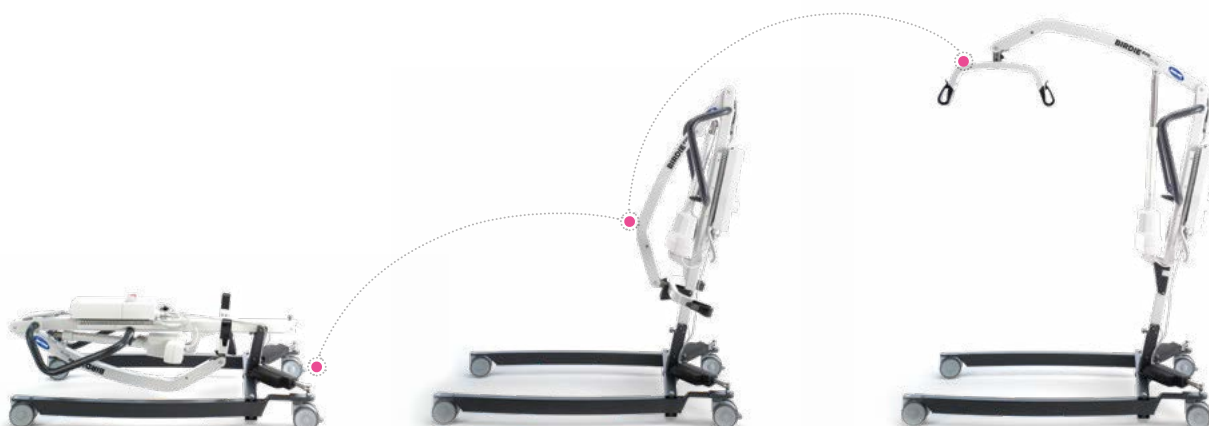

# Birdie<sup>EVO</sup>

personløftere



**Birdie<sup>EVO</sup>**

Standard modell.



**Birdie<sup>EVO PLUS</sup>**

**Birdie<sup>EVO PLUS</sup>** med avansert elektronikk, serviceindikator og ekstra deksel over basen.



## Konfigurasjon

- ▶ Elektrisk benspreder
- ▶ Elektrisk/mekanisk nødsenk
- ▶ Snap lock hurtigkobling på løftebøyle
- ▶ 2 punkts løftebøyle. 4 punkts tilgjengelig som tilbehør
- ▶ Stort utvalg av seil
- ▶ Personvekt tilgjengelig som tilbehør

## Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktene, vennligst se brukermanualen som kan lastes ned på [www.invacare.no](http://www.invacare.no).



Lengde ▼



Bredde ▼




Løftehøyde ▼



Totalvekt ▼



Maksimal brukervekt ▼

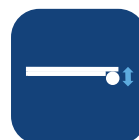

Høyde på ben ▼



Antall løft uten lading ▼

|                                  | Lengde ▼ | Bredde ▼ | Løftehøyde ▼  | Totalvekt ▼ | Maksimal brukervekt ▼ | Høyde på ben ▼ | Antall løft uten lading ▼ |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Birdie<sup>EVO</sup></b>      | 1220 mm  | 640 mm   | 415 - 1660 mm | 40 kg       | 180 kg                | 115 mm         | 40 sykluser               |
| <b>Birdie<sup>EVO PLUS</sup></b> | 1235 mm  | 640 mm   | 415 - 1660 mm | 41 kg       | 180 kg                | 115 mm         | 40 sykluser               |

## Artikkelnummer ▼

Produkter merket med stjerne (\*) er øvrig sortiment.

Artikkelnummer    Beskrivelse

\* 1650126    Birdie Evo

1650133    Birdie Evo Plus

AP60121103    Personvekt

AP1651537    Feste til personvekt

**Robin®**



Perfekt balanse og komfort



Takløfteren *Invacare Robin* foretar forflytninger på den mest innovative måte, også med tanke på pleiepersonalet. Den er designet med to parallelle stropper, som gir stabilt løft og god kontakt mellom brukeren og personalet, samtidig som det ivaretar pasientens komfort og trygghet. Uten behovet for en løftebøyle kan forflytningen foregå med verdighet.



### Komfort

Designet med to parallelle løftestropper gir svært god stabilitet i forflytningen. Slow start/stopp-funksjonen gjør forflytningen mer skånsom for brukeren. Motoren har to hastigheter slik at forflytningen kan utføres raskere. Konfigureringen med to parallelle stropper eliminerer behovet for løftebøyle, og tilpasser seg brukerens vekt og fasong.

### Trygg og verdig forflytning


Personlig kontakt er viktig. Fraværet av en løftebøyle reduserer faren for å komme nær delene på løfteutstyret. Dette forsterker følelsen av en unik og verdig måte å forflytte personer på.



### Enkel å arbeide med - lett å anvende

Vårt patenterte stroppestystem gjør det lettere for pleiepersonalet å montere seilet korrekt, og med den enkle låsemekanismen er sikkerheten høy. Motorenheten kjøres enkelt via skinner systemet i rett posisjon. Den brukervennlige håndkontrollen har tydelige funksjonstaster, og er lett å anvende. Et blått lys på undersiden av motorenheten lyser når løfteren er i bruk. Lyset vil blinke ved lavt batterinivå.


### Egenskaper og tilbehør

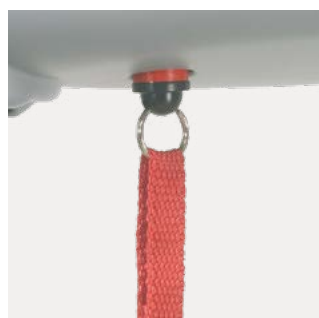

**Nødstop og  
nedsenking**



**Selvjusterende  
stroppeinnrulling**

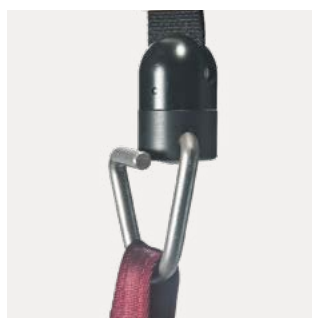

**Automatisk sikrede  
løftekroker**



**Snapplås til  
håndkontroll**

## Egenskaper og tilbehør



### Robin

Det unike stropesystemet uten bruk av løftebøyle.



### Robin Mover

Med integrert framdrift.



**Blått lys indikerer at motoren er i bruk. Lyset blinker ved lavt batterinivå.**



**Lad motoren gjennom håndkontrollen når den ikke er i bruk.**



**Eksternt reservebatteri**

Art.nr 1444014



**Betjeningsknapper på løftemotoren**



### Vekt

Enkel å montere og å bruke.  
Art.nr 1493132



### Flexiscope

Bredder ut løftebåndene for å gi større avstand mellom løftekroene.  
Art. nr 1446269-7012








### Planløft

Gir god forflytning ved horisontalt leie.  
Art. nr 1504765-7012



① **Håndkontroll**  
Med symboler på knappene.  
② **Robin Mover håndkontroll**  
Med symboler for opp/ned og retning.


## Tekniske data
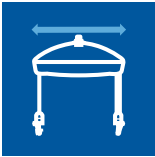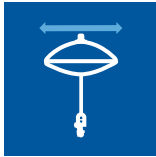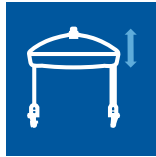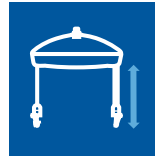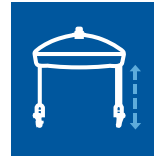
|                    | Lengde motor                                                                             | Bredde motor                                                                             | Høyde motor                                                                              | Lengde stropper                                                                             | Regulering av lengde, stropper                                                                                        | Produktvekt                                                                              | Maks. brukervekt                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Robin</b>       |  470 mm |  250 mm |  190 mm |  2,5 meter |  30 mm/s (85 kg),<br>40 mm/s (0 kg) |  7 kg |  200 kg |
| <b>Robin Mover</b> | 470 mm                                                                                   | 250 mm                                                                                   | 310 mm                                                                                   | 2,5 meter                                                                                   | 30 mm/s (85 kg),<br>40 mm/s (0 kg)                                                                                    | 9,5 kg                                                                                   | 200 kg                                                                                     |



Bariatrisk bruk

## Rammefarge



hvit/grå


# EC-Track™



Diskret, fleksibelt og sikkert


*Invacare* **EC Track** er et skinneresystem som sammen med *Invacare* **Robin** gir en meget funksjonell løsning for takmontert personløft. For å imøtekomme ulike forflytningsbehov tilbyr vi et bredt spekter av skinneløsninger. Det allsidige skinneresystemet egner seg for feste både i tak og på vegg. **EC Track** er laget av lett aluminiumsmateriale og er enkelt å installere.

## Egenskaper og valgmuligheter

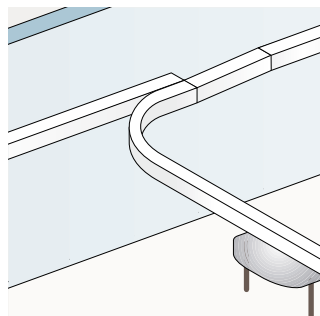


### Sporveksler

Gjør det mulig å endre retning mellom to skinner.

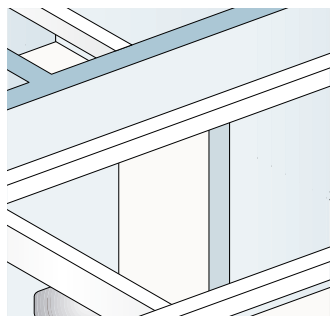


### Rom-til-rom-forflytning

Med to *Invacare* **Robin**-motorer og en rom-til-rom hengerulle, er det mulig å flytte brukeren fra rom til rom.

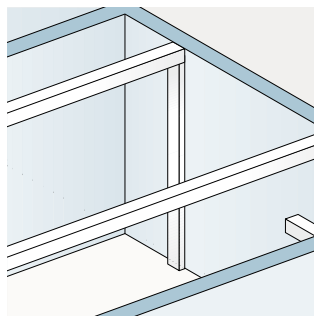



### Veggmontering

Skinnene kan ved hjelp av støtteben monteres på steder hvor veggen ikke har tilstrekkelig bærekapasitet.

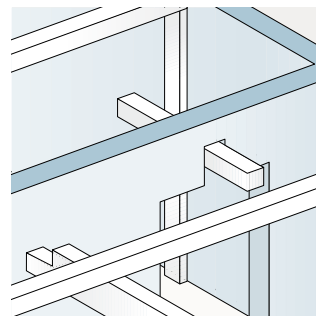


### Overgangskobling

For å flytte brukeren fra et rom til et annet trenger man kun én *Invacare* **Robin**-motor.

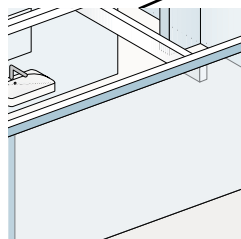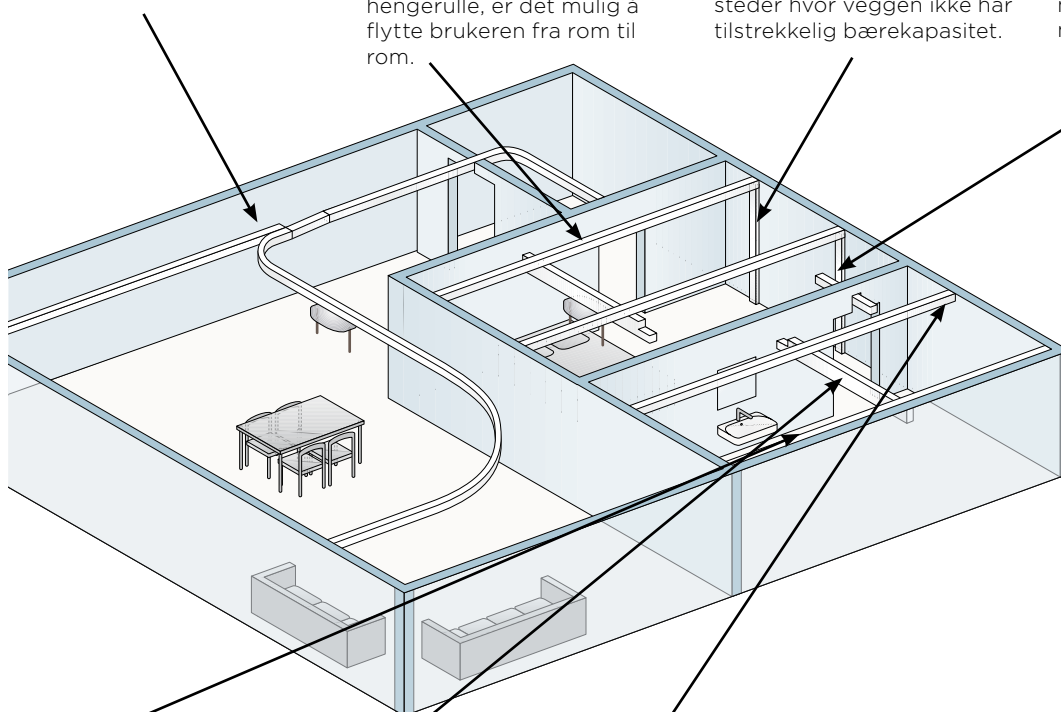


### Veggbeslag, sidehengt

For å installere skinnen langs veggen.

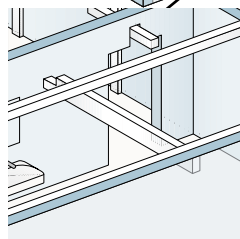

### Travers-system

Gir tilgang til ubegrenset antall løftesteder.

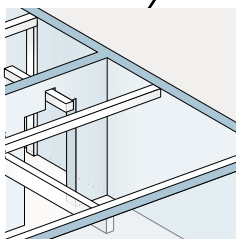

### Veggbeslag, endehengt

Gjør det mulig å montere skinnene direkte på veggen.

## Tekniske data

Maks. brukervekt



**CE** *Invacare* **EC-Track** 200 kg

## Rammefarge



Hvit



Aluminium

# Invacare® Seilprogram




Optimal passform med høy grad  
av komfort og sikkerhet



*Invacares* seilprogram tilbyr et bredt spekter av seil til brukere med forskjellig grad av funksjonsnedsettelse. Seilene er utviklet i samarbeid med terapeuter for optimal passform og støtte for brukeren, samtidig som de er lette for hjelperen å arbeide med. Seilene leveres i tre forskjellige materialer i opp til fem størrelser, og har gode justeringsmuligheter.


### *Invacare* **Løfteseil universal høy rygg**

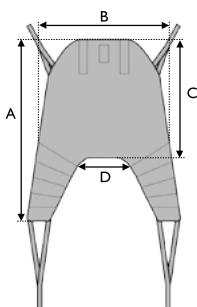

Støtter hele kroppen og gir en behagelig, lett tilbakelent stilling for brukeren. *Invacare Løfteseil høy rygg* anvendes til personer som har nedsatt kontroll over hode og kropp ved forflytning fra gulv til seng og mellom seng til stol. **Løfteseil høy rygg** kan anvendes uten hodestøtte ved å fjerne plaststiverne.

| Størrelse | A    | B    | C   | D   |
|-----------|------|------|-----|-----|
| <b>XS</b> | 1040 | 740  | 610 | 340 |
| <b>S</b>  | 1080 | 840  | 730 | 380 |
| <b>M</b>  | 1420 | 1000 | 830 | 400 |
| <b>L</b>  | 1550 | 1100 | 920 | 510 |
| <b>XL</b> | 1680 | 1150 | 920 | 550 |

### *Invacare* **Løfteseil universal høy rygg smal**

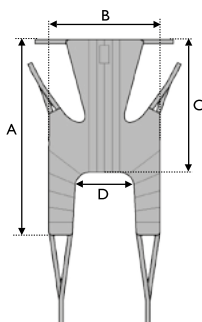


Støtter hele kroppen og hodet og gir en behagelig, lett tilbakelent stilling for brukeren. I *Invacare Løfteseil høy rygg smal* har brukeren mulighet for å ha armene utenfor seilet. **Løfteseil høy rygg smal** brukes til personer som har nedsatt kontroll over hode og kropp ved forflytning fra gulv til seng og mellom seng til stol. Modellen er avstivet i ryggen for optimal fordeling av trykket og økt komfort for brukeren. Nå også tilgjengelig i netting og elastisk polyester.

| Størrelse | A    | B    | C   | D   |
|-----------|------|------|-----|-----|
| <b>S</b>  | 1380 | 840  | 880 | 340 |
| <b>M</b>  | 1510 | 950  | 930 | 450 |
| <b>L</b>  | 1580 | 1100 | 970 | 560 |
| <b>XL</b> | 1590 | 1190 | 970 | 630 |

---

 Invacare **Løfteseil universal medium rygg**


---

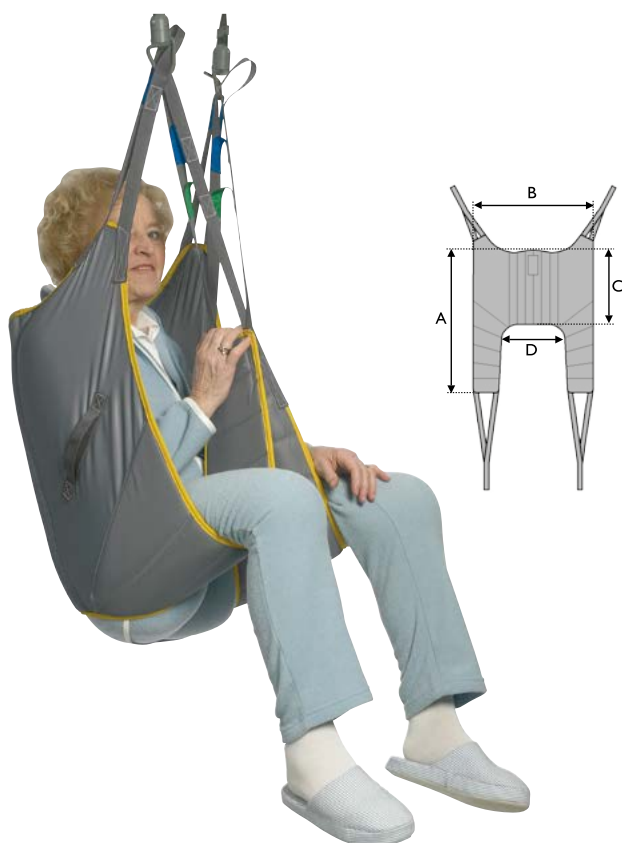

Støtter hele kroppen opp til skuldrene. Brukeren må selv kunne holde hodet. Seilet blir ofte foretrukket som et allround-seil, ettersom det støtter hele kroppen og dermed gir en god følelse av trygghet.

Invacare **Løfteseil medium rygg** anvendes til forflytninger i sittende stilling og er lett og enkelt å arbeide med. Modellen er polstret i ryggen for optimal fordeling av trykket og økt komfort for brukeren.

| Størrelse | A    | B    | C   | D   |
|-----------|------|------|-----|-----|
| <b>S</b>  | 1000 | 920  | 510 | 410 |
| <b>M</b>  | 1090 | 1050 | 560 | 480 |
| <b>L</b>  | 1180 | 1090 | 580 | 560 |
| <b>XL</b> | 1240 | 1250 | 585 | 710 |

---

 Invacare **Løfteseil universal lav rygg**



---



Støtter hofte og nederste del av ryggen. Seilet krever at brukeren har noe funksjon i kroppen og full kontroll over hodet. Det anvendes til forflytninger i sittende stilling og er lett og enkelt å arbeide med. Modellen er polstret i ryggen for optimal fordeling av trykket og økt komfort for brukeren.

| Størrelse | A   | B    | C   | D   |
|-----------|-----|------|-----|-----|
| <b>S</b>  | 850 | 800  | 350 | 410 |
| <b>M</b>  | 920 | 940  | 375 | 480 |
| <b>L</b>  | 950 | 1075 | 405 | 575 |

## Invacare **Toalettseil lav og høy rygg**

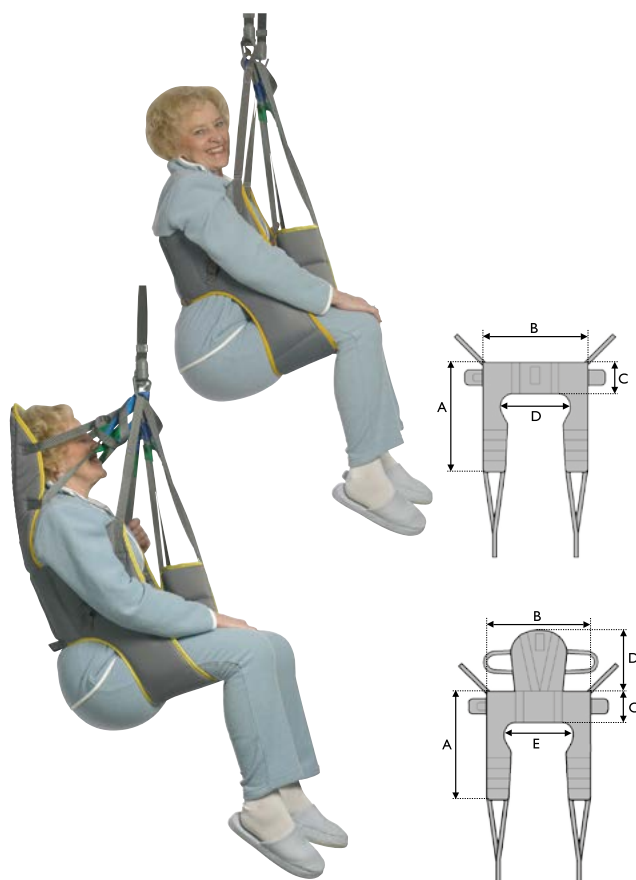

Invacare tilbyr to modeller av toalettseil; med eller uten hodestøtte. Begge modeller har belte for økt støtte rundt overkroppen, og for å sikre brukerens posisjon i seilet. Toalettseil benyttes til personer med lett nedsatt funksjon i kroppen og lett nedsatt funksjon i hoften. Modellen med hodestøtte anvendes til de brukere som utover dette har nedsatt kontroll over hodet. **Invacare Toalettseil lav og høy rygg** er velegnet dersom man ønsker mulighet for av- og påkledning under løftet i forbindelse med toalettbesøk. Anvendes til løft til og fra sittende, og er meget lett og enkelt å bruke.

### Invacare **Toalettseil lav rygg**

| Størrelse | A    | B    | C   | D   |
|-----------|------|------|-----|-----|
| <b>S</b>  | 870  | 710  | 200 | 430 |
| <b>M</b>  | 950  | 800  | 230 | 490 |
| <b>L</b>  | 1020 | 900  | 230 | 600 |
| <b>XL</b> | 1100 | 1080 | 270 | 760 |

### Invacare **Toalettseil høy rygg**

| Størrelse | A    | B    | C   | D   | E   |
|-----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>S</b>  | 870  | 710  | 200 | 400 | 430 |
| <b>M</b>  | 950  | 800  | 230 | 470 | 490 |
| <b>L</b>  | 1020 | 900  | 230 | 470 | 600 |
| <b>XL</b> | 1100 | 1080 | 270 | 470 | 760 |



## Invacare **Easy-fit Løfteseil høy rygg**



Støtter hele kroppen og hodet, og er således velegnet til brukere med høy grad av funksjonsnedsettelse. Den delte benstøtten er lett å arbeide med og seilet gir brukeren en forholdsvis oppreist posisjon i seilet. **Invacare Easy-fit Løfteseil høy rygg** er også velegnet til brukere med amputasjon. **Easy-fit Løfteseil høy rygg** er enkelt å feste, enten brukeren er sittende eller liggende.

| Størrelse | A    | B   | C   | D   |
|-----------|------|-----|-----|-----|
| <b>XS</b> | 1100 | 710 | 595 | 170 |
| <b>S</b>  | 1130 | 760 | 640 | 180 |
| <b>M</b>  | 1200 | 800 | 675 | 190 |
| <b>L</b>  | 1270 | 860 | 720 | 210 |
| <b>XL</b> | 1390 | 940 | 780 | 220 |

## Invacare **Comfort, Comfort med toalettåpning**

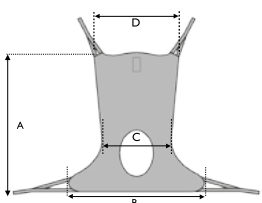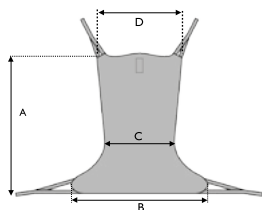


Denne seilmodellen er tilgjengelig i to modeller; **Comfort** støtter hele kroppen, inkludert hodet. Dette seilet passer brukere med god hodekontroll. Invacares **Comfort**-sortiment er tilpasset brukere med kronisk smerte. Seilene kan også anvendes til brukere som er amputert over kneet, eller til brukere som av ulike årsaker skal forbli sittende i seilet.

**Comfort**-seilene legges på i liggende stilling og anvendes til forflytning i sittende stilling. Comfortseilet med toalettåpning, **Invacare Comfort med toalettåpning**, anvendes i forbindelse med toalettbesøk.

### Invacare **Comfortseil** med og uten toalettåpning

| Størrelse | A    | B    | C   | D    |
|-----------|------|------|-----|------|
| <b>XS</b> | 1040 | 970  | 510 | 960  |
| <b>S</b>  | 1150 | 1050 | 550 | 1020 |
| <b>M</b>  | 1395 | 1170 | 610 | 1160 |
| <b>L</b>  | 1445 | 1290 | 675 | 1280 |
| <b>XL</b> | 1460 | 1330 | 745 | 1470 |

## Invacare **Amputasjon løfteseil medium rygg**

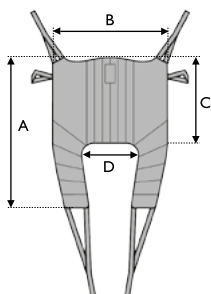


Denne modellen er spesielt tilpasset brukere med ensidig eller dobbeltsidig amputasjon. Lårstroppene legges under begge ekstremitetene og holdes tett til kroppen ved hjelp av løkkene i skulderhøyde.

Invacare **Amputasjon løfteseil** støtter godt og gir en behagelig og trygg, lett bakoverlent posisjon for brukeren. Seilet er polstret i hele ryggen for optimal fordeling av trykket og gir dermed økt komfort for brukeren.

| Størrelse | A    | B    | C   | D   |
|-----------|------|------|-----|-----|
| <b>S</b>  | 1100 | 930  | 490 | 320 |
| <b>M</b>  | 1160 | 970  | 520 | 360 |
| <b>L</b>  | 1360 | 1230 | 570 | 430 |
| <b>XL</b> | 1400 | 1350 | 570 | 480 |

## Invacare **Løftevest**

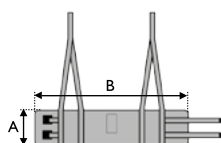

Invacare **Løftevest** løfter rundt overkroppen. Brukeren må være i kontakt med gulvet og ha noe ståfunksjon. **Løftevesten** anvendes sammen med takmontert personløfter til gåtrening for personer med nedsatt gangfunksjon og/eller nedsatt balanse. Vesten er anvendelig ved toalettbesøk og til å minske risikoen for at hjelperen får belastningsskader.

## Invacare **Løftevest**

| Størrelse | A   | B    |
|-----------|-----|------|
| <b>XS</b> | 150 | 750  |
| <b>S</b>  | 150 | 850  |
| <b>M</b>  | 180 | 950  |
| <b>L</b>  | 180 | 1050 |
| <b>XL</b> | 180 | 1200 |


## Invacare **Løftebånd**



Invacare **Løftebånd** anvendes til personer med lett nedsatt funksjon i kroppen og i hoften. Denne modellen velges ofte til personer som ønsker å være selvhjulpne i løftesituasjonen.

| Størrelse   | A    | B   |
|-------------|------|-----|
| <b>Kort</b> | 930  | 120 |
| <b>Lang</b> | 1120 | 120 |


## Invacare **Løfteseil ståløfter**

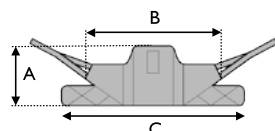

Invacare **Løfteseil ståløfter** gir sammen med ståløfteren Invacare **ISA** en behagelig og sikker forflytning for brukere som kan bære sin egen vekt, men som ikke kan stå selvstendig. Utover dette bør brukeren ha kropps- og hodekontroll, samt kunne holde fast i løftearmen med hånden. Seilet er godt polstret og har antiskli-materiale i ryggen for å sikre et behagelig løft.

| Størrelse | A   | B    | C    |
|-----------|-----|------|------|
| <b>S</b>  | 260 | 840  | 950  |
| <b>M</b>  | 330 | 895  | 1170 |
| <b>L</b>  | 360 | 950  | 1270 |
| <b>XL</b> | 360 | 1020 | 1810 |

## Invacare **Transportseil ståløfter sittende**

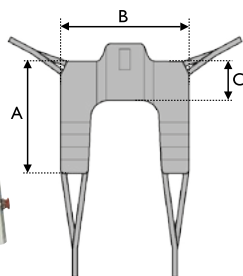

Invacare **Transportseil ståløfter sittende\*** seil anvendes sammen med ståløfteren Invacare **ISA** og gir enkel forflytning fra sittende til sittende eller ved transport fra A til B. Seilet anvendes til brukere som har god kropps- og hodekontroll, samt kan holde fast i løftearmen med hånden.

| Størrelse | A    | B    | C   |
|-----------|------|------|-----|
| <b>S</b>  | 860  | 840  | 240 |
| <b>M</b>  | 1020 | 895  | 260 |
| <b>L</b>  | 1180 | 950  | 330 |
| <b>XL</b> | 1230 | 1020 | 350 |

\* Vennligst se i løfterens kompatibilitetsinstruksjoner.

## Tilbehør seil



Fleece-polstring for ekstra komfort.



Skuminnlegg til ben. For **Løfteseil høy rygg**, **medium rygg** og **smal rygg** i nettingmateriale.



Forlengelsesbånd - gir flere posisjoneringsmuligheter.



Hodestøtte-avstiver - for seil med hodestøtte. **Easy-fit**, **løfteseil med høy rygg**.

| Seilmodell                       | Materiale     |         |                    | Størrelse |   |   |   |    |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------------|-----------|---|---|---|----|
|                                  | Hel polyester | Netting | Elastisk polyester | XS        | S | M | L | XL |
| Løfteseil lav rygg               | ●             |         |                    |           | ● | ● | ● |    |
| Løfteseil medium rygg            | ●             | ●       | ●                  |           | ● | ● | ● | ●  |
| Løfteseil høy rygg               | ●             | ●       | ●                  | ●         | ● | ● | ● | ●  |
| Løfteseil høy rygg smal          | ●             | ●       | ●                  |           | ● | ● | ● | 1  |
| Toalettseil                      | ●             |         |                    |           | ● | ● | ● | ●  |
| Toalettseil høy rygg             | ●             |         |                    |           | ● | ● | ● | ●  |
| Easy-fit seil                    | ●             |         | ●                  | ●         | ● | ● | ● | ●  |
| Amputasjonseil                   | ●             |         |                    |           | ● | ● | ● | ●  |
| Comfortseil                      |               | ●       | ●                  | ●         | ● | ● | ● | ●  |
| Comfort toalettseil              | ●             | ●       |                    | ●         | ● | ● | ● | ●  |
| Comfort standardseil             |               | ●       | ●                  |           | ● | ● | ● |    |
| Løftevest                        | ●             |         |                    | ●         | ● | ● | ● | ●  |
| Løfteseil ståløfter              | ●             |         |                    |           | ● | ● | ● | ●  |
| Transportseil ståløfter sittende | ●             |         |                    |           | ● | ● | ● | ●  |

1/ Kun tilgjengelig i hel polyester

\*Vi leverer andre seil på forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon.

## Materiale



### Hel polyester

Standard materiale som er lett å arbeide med - det blir lett og tørker hurtig etter vask.

\* Det er viktig å foreta en risikoenalyse for trykksår for pasienter som blir sittende i seilet i lengre perioder.



### Netting\*



Anvendes ved bading eller hvis brukeren skal sitte på seilet.



### Elastisk polyester\*

Lett elastisk og former seg etter kroppen. Er velegnet til brukere med risiko for trykksår.

## Veiledning størrelser

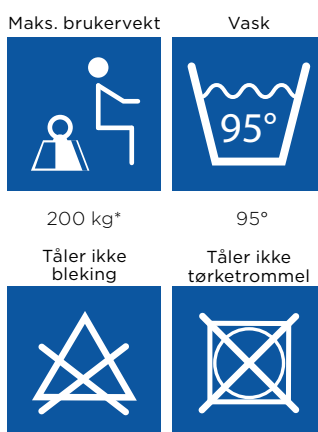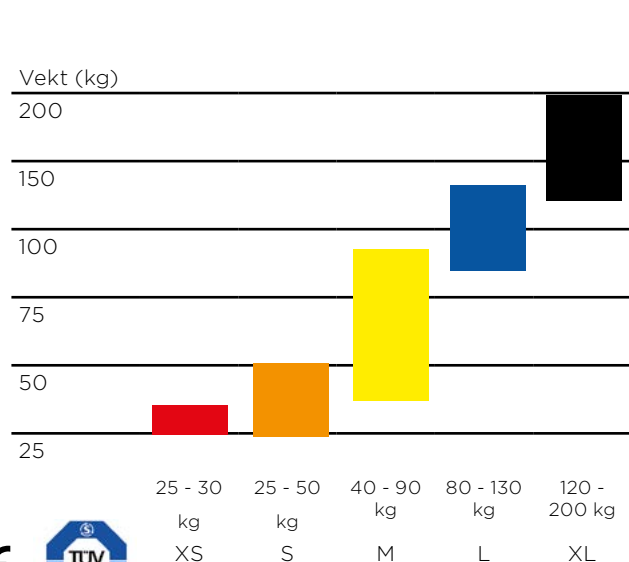

Hvert løfteseil bør prøves og tilpasses den enkelte bruker for å sikre optimal komfort og sikkerhet i løftesituasjonen.

\* Løfteseil str. XL har maksimal brukervekt 250 kg.

# Artikkelnummer seilprogram

Produkter merket med stjerne (\*) er øvrig sortiment.

## Seiltype

| Art.nr    | Personløftere                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|
| * 1483776 | Løfteseil Universal høy rygg, XS              |
| 1483777   | Løfteseil Universal høy rygg, S               |
| 1483778   | Løfteseil Universal høy rygg, M, solid        |
| 1483779   | Løfteseil Universal høy rygg, L, solid        |
| 1485949   | Løfteseil Universal høy rygg, XL, solid       |
| * 1485950 | Løfteseil Universal høy rygg, XS, nett        |
| 1485951   | Løfteseil Universal høy rygg, S, nett         |
| 1485952   | Løfteseil Universal høy rygg, M, nett         |
| 1485953   | Løfteseil Universal høy rygg, L, nett         |
| 1485954   | Løfteseil Universal høy rygg, XL, nett        |
| * 1485955 | Løfteseil Universal høy rygg XS, elastisk     |
| * 1485956 | Løfteseil Universal høy rygg , S, elastisk    |
| * 1485957 | Løfteseil Universal høy rygg , M, elastisk    |
| * 1485958 | Løfteseil Universal høy rygg , L, elastisk    |
| * 1485959 | Løfteseil Universal høy rygg , XL, elastisk   |
| * 1485960 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, S          |
| * 1485961 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, M          |
| * 1485962 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, L          |
| * 1485963 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, XL         |
| * 1517761 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, S nett     |
| * 1517762 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, M nett     |
| * 1517892 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, L nett     |
| * 1517894 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, S elastisk |
| * 1518021 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, M elastisk |
| * 1518022 | Løfteseil Universal høy rygg Smal, L elastisk |
| 1485882   | Løfteseil Universal medium rygg, S            |
| 1485883   | Løfteseil Universal medium rygg, M            |
| 1485884   | Løfteseil Universal medium rygg, L            |
| 1485885   | Løfteseil Universal medium rygg, XL           |
| 1478411   | Løfteseil Universal medium rygg, S, nett      |
| 1478412   | Løfteseil Universal medium rygg, M, nett      |
| 1478413   | Løfteseil Universal medium rygg, L, nett      |
| 1478414   | Løfteseil Universal medium rygg, XL, nett     |
| * 1485363 | Løfteseil Universal medium rygg, S, elastisk  |
| * 1485364 | Løfteseil Universal medium rygg, M, elastisk  |
| * 1485365 | Løfteseil Universal medium rygg, L, elastisk  |
| * 1485366 | Løfteseil Universal medium rygg, XL, elastisk |
| * 1491893 | Løfteseil Universal lav rygg, S,              |
| * 1491894 | Løfteseil Universal lav rygg, M               |
| * 1451067 | Løfteseil Universal lav rygg, L               |

# Artikkelnummer seilprogram

| Seiltype  |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Art.nr    | Personløftere                                      |
| 1478440   | Løfteseil Toalett S                                |
| 1478441   | Løfteseil Toalett M                                |
| 1478442   | Løfteseil Toalett L                                |
| 1478443   | Løfteseil Toalett XL                               |
| 1478444   | Løfteseil Toalett m.høy rygg S                     |
| 1478445   | Løfteseil Toalett m.høy rygg M                     |
| 1478446   | Løfteseil Toalett m.høy rygg L                     |
| 1484780   | Løfteseil Toalett m.høy rygg XL                    |
| * 1451101 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XS           |
| * 1451102 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg S            |
| * 1451103 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg M            |
| * 1451104 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg L            |
| * 1451105 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XL           |
| * 1451106 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XS, elastisk |
| * 1451107 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy ryggS , elastisk  |
| * 1451108 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy ryggM , elastisk  |
| * 1451109 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg L, elastisk  |
| * 1451110 | Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XL, elastisk |
| * 1485967 | Løfteseil Comfort XS, nett                         |
| * 1485968 | Løfteseil Comfort S, nett                          |
| * 1485969 | Løfteseil Comfort M, nett                          |
| * 1485970 | Løfteseil Comfort L, nett                          |
| * 1485947 | Løfteseil Comfort XL, nett                         |
| * 1485948 | Løfteseil Comfort XS, elastisk                     |
| * 1485554 | Løfteseil Comfort S, elastisk                      |
| * 1485777 | Løfteseil Comfort M, elastisk                      |
| * 1485778 | Løfteseil Comfort L, elastisk                      |
| * 1451090 | Løfteseil Comfort XL, elastisk                     |
| * 1451091 | Løfteseil Comfort Toalett XS,                      |
| * 1451092 | Løfteseil Comfort Toalett S                        |
| * 1451093 | Løfteseil Comfort Toalett M                        |
| * 1451094 | Løfteseil Comfort Toalett L                        |
| * 1451095 | Løfteseil Comfort Toalett XL                       |
| * 1451096 | Løfteseil Comfort Toalett XS, nett                 |
| * 1451097 | Løfteseil Comfort toalett S, nett                  |
| * 1451098 | Løfteseil Comfort toalett M, nett                  |
| * 1451099 | Løfteseil Comfort toalett L, nett                  |
| * 1451100 | Løfteseil Comfort toalett XL, nett                 |
| 1485367   | Løfteseil Amputasjon, S                            |
| 1485368   | Løfteseil Amputasjon, M                            |
| 1485369   | Løfteseil Amputasjon, L                            |
| 1485370   | Løfteseil Amputasjon, XL                           |
| * 1485404 | Løftevest XS                                       |
| * 1485405 | Løftevest S                                        |
| * 1485406 | Løftevest M                                        |
| * 1484683 | Løftevest L                                        |
| * 1484684 | Løftevest XL                                       |
|           |                                                    |
| * 1488424 | Løftebånd langt                                    |
| * 1488876 | Løftebånd kort                                     |
| 1484685   | Løfteseil Ståløfter lite                           |
| 1484686   | Løfteseil Ståløfter medium                         |
| 1484687   | Løfteseil Ståløfter stort                          |
| 1484688   | Løfteseil Ståløfter ekstra stort                   |
| * 1484689 | Transportseil ståløft lite                         |
| * 1484690 | Transportseil ståløft medium                       |
| * 1484691 | Transportseil ståløft stort                        |
| * 1485117 | Transportseil ståløft ekstra stort                 |

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2020 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

PERSONLØFTERE OG SEIL - NO - 03/2020

